

Руководство по эксплуатации SKIN RELIEF SR - 02 массажер для микродермабразии (механического пилинга)

SkinRelief

ACETINO™
PROFESSIONAL



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Благодарим Вас за то, что приобрели «Skin Relief». Это безопасный и доступный способ обновить текстуру кожи и улучшить мышечный тонус. У компактного по размеру прибора есть корпус прибора в виде рукоятки, две насадки (Спонж и Щетка для дермабразии). **SR-02** поставляется с 2-мя алкалиновыми батарейками типа «AA».

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР «SKIN RELIEF»?


Прибор для микродермабразии «Skin Relief» - безопасная и эффективная альтернатива дорогим химическим и лазерным пилингам, пластическим операциям и лазерной хирургии. Микродермабразия является механическим пилингом. «Skin Relief» вызывает следующие эффекты: отшелушивание отмерших клеток с поверхности кожи, глубокая и безболезненная очистка кожи, уменьшение гиперпигментации, уменьшение мелких морщин, сглаживание рельефа кожи, улучшение цвета лица и текстуры кожи, стимуляция выработки коллагена, уменьшение расширенных пор, устранение комедонов, деликатный массаж кожи лица и области декольте. После проведения процедур микродермабразии кожа становится молодой, шелковистой, с гладкой структурой.

Установите на прибор насадку «Спонж», окуните ее в любую косметическую пену, которую хотите использовать, и просто нажмите на кнопку. После этого Вам остается наслаждаться чудесными ощущениями, которые доставит Вам прибор. «Спонж» - идеален для нанесения и равномерного распределения крема, деликатного массажа и очищения кожи, глубокого увлажнения кожи. Так же вы можете установить насадку «Щетка для дермабразии» и насладиться процедурой. «Щетка для дермабразии» - применяется (со скрабом) для отшелушивания отмерших клеток с поверхности кожи, глубокой и безболезненной очистки кожи, повышения тонуса кожа.


Комплектация SR -02

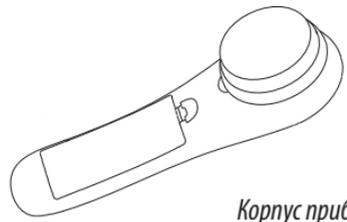

Корпус прибора

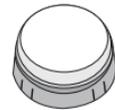

Спонж

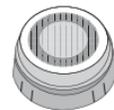

Щетка для дермабразии



Руководство по эксплуатации



2 батареи типа «AA»

Устройство имеет эргономичный дизайн и удобную форму, работает на двух батарейках типа «AA». С его помощью вы сможете легко ухаживать за своей кожей прямо у себя дома. После проведения нескольких процедур у вас будет более здоровая, эластичная и сияющая кожа.

Предупреждения перед использованием:



ВНИМАНИЕ

Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или косметологом перед началом использования прибора, если в настоящее время вы проходите курс лечения кожи или наблюдаетесь у дерматолога.

Данный прибор отлично работает с увлажняющими и очищающими средствами для лица, однако, рекомендуется перед применением прибора на лице предварительно проверить его работу на руке. Некоторые очищающие средства могут вызывать кожное раздражение при применении вместе с прибором.

Использование прибора для удаления макияжа может привести к загрязнению щетинок. Помните, что загрязнение не отражается на эффективности работы прибора. При загрязнении очистите насадки при помощи теплой мыльной воды (не выше 60° C). Не допускайте использования прибора детьми без наблюдения.



ВНИМАНИЕ

Применяйте прибор только для тех целей, которые обозначены в настоящем руководстве. НИКОГДА не используйте детали и принадлежности, изготовленные другими производителями, вместе с прибором.

Предупреждения перед использованием:

Не используйте устройство в следующих случаях:

- при кожном раздражении или аллергии
- при солнечных ожогах
- при наличии открытых ранок
- после химического и лазерного пилингов
- если принимаете лекарства, повышающие чувствительность кожи
- после пластической операции на лице
- при наличии воспалений, прыщей, угрей и иных серьезных кожных заболеваний или инфекций

Не давайте пользоваться насадками людям с кожными заболеваниями. Рекомендуется иметь индивидуальные насадки в целях гигиены и не пользоваться ими совместно с другими людьми.



ВНИМАНИЕ

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ.

Подготовка прибора перед использованием

1. Нажмите на «ключ» и откройте крышку батарейного отсека, как показано на Рис. 1. Прибор работает на 2 батарейках типа AA. Для более продолжительного времени действия рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.

2. Вставьте батарейки в прибор. Примечание:
* Батарейки необходимо вставить так, чтобы символы +/- на батарейках совпадали с символами +/--отделения для батареек на корпусе прибора Рис. 2.
** Вставляйте батарейки сухими руками.

3. Сначала вставьте нижнюю часть крышки, а затем надавите на верхнюю часть, чтобы вставить крышку обратно - Рис. 3.



ВНИМАНИЕ

Когда мощность прибора падает, необходимо заменить батарейки. Если вы долгое время не собираетесь использовать прибор, достаньте батарейки.

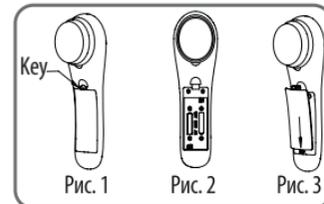


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Применение

Удалите макияж с глаз, если таковой присутствует, перед началом эксплуатации устройства. Настоящий прибор не разработан для удаления макияжа с глаз. Не вдавливайте устройство слишком сильно в вашу кожу, это может привести к снижению эффективности работы устройства.

1. Используйте повязку на голову, чтобы убрать с лица волосы, которые могут попасть на прибор и запутаться.
2. Наденьте на прибор насадку «Спонж». Обмакните ее в любой косметический крем и точечно нанесите его в большом количестве на лоб, щеки, нос и подбородок (любо любую иную область на ваше усмотрение).
3. Включите прибор.
4. Мягкими круговыми движениями нанесите при помощи «Спонжа» очищающее средство на свое лицо и шею (либо другие области, на которые будет воздействовать прибор).
5. Осторожно перемещайте «Спонж» по лицу, совершая круговые, вертикальные движения, чтобы крем впитался в кожу. Два режима – МЯГКИЙ (LOW) и СИЛЬНЫЙ (HIGH). Выберите тот, который подходит Вам. Для лица и области декольте рекомендовано использовать МЯГКИЙ (LOW) режим.
6. Продолжайте втирать крем в кожу или проблемные зоны (морщинки, места, где застаивается кровь, крупные поры и возрастные пигментные пятна) в течение 5-10 минут.
7. После проведения процедуры выключите прибор и снимите насадку «Спонж».
8. Тщательно промойте обработанные области теплой водой и насухо вытрите мягким полотенцем.
9. Помимо косметического крема вы можете использовать очищающее средство, скраб и «Щетку для дермabrasии», чтобы глубоко очистить свою кожу. Перед применением смочите щетинки «Щетки» теплой водой. Включите устройство и аккуратно поместите его на кожу. Плавными перемещайте прибор небольшими вращательными движениями от лобной зоны лица. При использовании держите головку прибора под прямым углом к вашей коже. Это позволит более эффективно использовать наружные щетинки щетки. Устройство отлично подходит не только для очистки лица, а также и для рук, ладоней, плеч, области декольте и ног.
10. После завершения процедуры дермabrasии – механического пилинга, наденьте насадку «Спонж» и нанесите на него увлажняющее средство. Включите устройство и аккуратно поместите его на кожу. Свободными, но аккуратными плавными круговыми движениями нанесите увлажняющее средство для большего проникновения в кожу.



ВНИМАНИЕ При контакте с глазами осторожно и тщательно промойте их водой. Если появится раздражение, обратитесь к врачу. Только для наружного применения. Если раздражение появляется в другом месте, также немедленно прекратите использование.

Следуйте описанным выше пунктам. Прибор поможет вашей коже выглядеть более здоровой.

Чистка прибора/Техническое обслуживание

После каждого использования необходимо производить очистку насадок. Тщательно промойте использованную насадку теплой водой, температура не выше 60° С. Просушите насадки.

«**Корпус прибора**» (в виде рукоятки): рекомендуется производить очистку корпуса один раз в неделю, счищать остаточные отложения. Протрите тряпочкой смоченной в теплой мыльной воде и просушите.



не используйте абразивные или химические чистящие средства для очистки данного устройства.
не мойте данное устройство в проточной воде.
не погружайте прибор в воду.

Замена насадок «Спонж» и «Щетка».

Каждые 2-3 месяца меняйте насадки, чтобы результаты чистки всегда были хорошими. Менять насадки также необходимо, если они изменили цвет или деформировались. Новые насадки можно приобрести в магазине, где вы купили прибор для дермabrasии «Skin Relief» SR -02.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ремонт приборов производят авторизованные сервисные центры.

На настоящий прибор установлен гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждениям; модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Серийные номера приборов компании «Технологии здоровья» включают дату изготовления прибора: Партия № 201101, 2011 – год производства, 01 – месяц производства.

Наименование и адрес торговой организации	
Модель и номер партии	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя. Внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.	
С правилами безопасного использования ознакомлен.	

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Изготовлено по заказу:

ООО «Технологии здоровья», г. Москва, Огородный проезд, д. 20, оф. 107В
тел./факс: +7 (495) 792 51 50, www.t-zdor.ru, email: info@t-zdor.ru
ИП Федоров А.А, Екатеринбург, Первомайская, д. 69
тел./факс +7 343 375 80 80, www.tz66.ru, email: zam@tz66.ru

Производитель:

«Ace-Tec Co., Ltd.», г. Донг Гуан, провинция Гуан Донг, Китай, +86 769-8318-6799, www.ace-tec.cn

г. Москва ООО «Технологии здоровья» Огородный проезд, д. 20, оф. 107В тел. +7 (495) 792-51-50, + 7 926 452-63-53	г. Вологда ул. Лечебная д. 32-А тел. + 7 8172 53-57-76, 53-14-60
г. Барнаул Деловой проезд, д. 6 тел. + 7 385 2 46-55-12; 46-55-13;46-55-14	г. Воронеж ул. 20 лет Октября, 92 тел. + 7 4732 42-22-22
г. Белгород ул. Мичурина, 486 тел. + 7 4722 31-79-83	г. Воронеж ул. Электросигнальная, д. 15 тел. + 7 4732 39-38-51, 61-07-15
г. Бийск ул. Максимовой, д. 5, тел. + 7 3854 35-67-29, 32-86-79	г. Воскресенск ул. Пионерская, д. 10/11 тел. +7 496 4424
г. Владивосток ул. Дальзаводская, д. 2, ТЦ "Всё для строительства", оф. 21, тел. + 7 4232 46-48-79	г. Екатеринбург ул. Первомайская, д. 69, тел. + 7 343 375-88-20, 375-80-80
г. Владимир ул. Батурина, д.39, корп. 21 тел. + 7 4922 43-01-36	г. Ижевск ул. Автозаводская, д. 36, тел. + 7 3412 50-87-94, 50-87-77

г. Нижний Новгород ул. Интернациональная, д. 100 тел. + 7 831 246-19-40	г. Санкт – Петербург Московский пр., д. 186 тел. + 7 8 12 640-01-81
г. Орел ул. Базовая, д.6, тел. + 7 4862 41-65-82, 41-66-27	г. Старый Оскол Белгородской обл. мкр-н Олимпийский 13а тел. + 7 910 741-03-50, моб. тел. + 7 910 327-45-63
г. Пенза ул. Свердлова, д.2, оф. 505 тел. + 7 8412 32-11-11	г. Таганрог ул. Чучева, д. 46-1 тел. + 7 8634 325563
г. Петрозаводск ул. Ровно, д.3, оф. 226 тел. + 7 8142 53-49-20	г. Тамбов ул. Магистральная, д. 10 тел. тел. +7 4752 52-63-14 моб. 8-910-652-13-67
г. Ростов-на-Дону ул. Чучева, д. 46-1 тел. +7 928 907-16-29	г. Тюмень ул. Луначарского, д. 42 «А», тел. + 7 3452 43-30-34
г. Самара Южный проезд, д. 106 тел. + 7 846 261-35-61, 261-84-56, 233-20-71	г. Челябинск р-н ЧМЗ, ул. Байкальская, д. 31, тел. + 7 351 721-59-95