


MAXION



**SEVEN LINER
SLIM / SLIM SET**

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Пневматический массажёр с функцией
дополнительного массажа рук и ног.

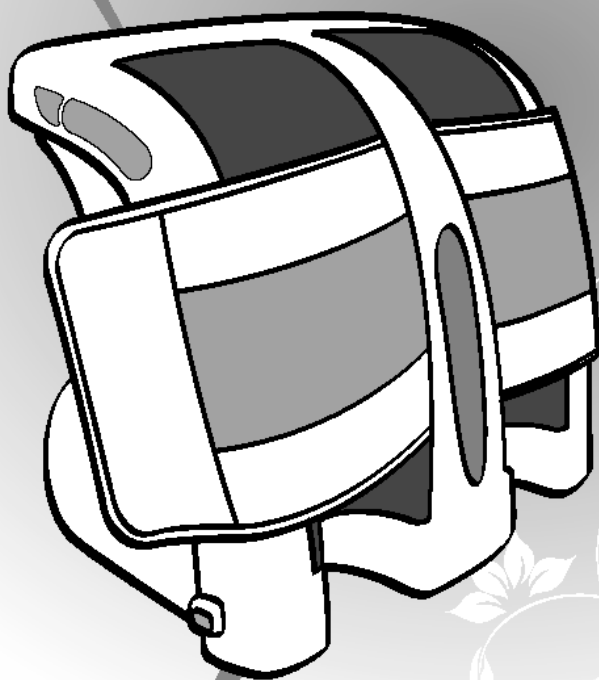



⚠️ Рекомендации по безопасному использованию массажёра.

При использовании массажера проконсультируйтесь с врачом.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по безопасному использованию массажером перед тем, как начать работу и следуйте инструкции.

Меры предосторожности, указанные ниже, приведены с тем, чтобы данный массажер использовался правильно и по назначению, и не нанес вреда пользователю или окружающим его людям. Поскольку все ниже перечисленное относится к безопасному использованию массажера, мы просим пользователей строго следовать всем рекомендациям данной инструкции.

Не использовать совместно с:

Любая разновидность имплантированных приспособлений;

Приборы электростимуляции, например стимулирующие деятельность сердца или легких;

Медицинские электрические устройства, такие как электрокардиограф.

При наличии у Вас признаков заболеваний, перечисленных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажером.

Острые, хронические заболевания;

Злокачественные опухоли;

Инфекционные заболевания;

Слабое сердце;

Высокая температура (более 38°С);

Повышенное кровяное давление;

Головные боли, боли в желудке и заболевания кожи.

Острое воспаление в ногах, гнойное воспаление.

Перелом, вывих, растяжение мышц.

Кроме того, не рекомендуется использовать массажер при **менструации, беременности и чувствительной коже**. Рекомендуется одевать облегчающую одежду

Меры предосторожности.

- Не пользуйтесь массажером непосредственно перед сном;
- В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем, немедленно прекратите пользоваться массажером, проконсультируйтесь с врачом.
- Не ходите в массажных «чулках», это может привести к их поломке;
- Не оставляйте массажер в местах, доступных для детей, и не позволяйте пользоваться массажером людям, которые не в состоянии отвечать за свои поступки.
- Не храните, не пользуйтесь массажером в местах с повышенной температурой, с повышенным содержанием влажности и пыли, во время принятия ванны или вождения машины;
- Не подвергайте массажер резким переменам температуры и не встряхивайте его. Это может привести к деформации, изменению цвета и образованию трещин.
- Не прокалывайте ремни или «чулки» острыми предметами.
- Первый сеанс рекомендуется проводить в течение установленного времени. При отсутствии побочных эффектов можно установить таймер на более продолжительное время.
- Не включайте подачу воздуха при открытой молнии или «липучки», это может привести к поломке, перед первичным использованием, проконсультируйтесь с врачом.
- Массажер изготовлен с применением высокоточных электронных компонентов, не пытайтесь его разобрать;
- Пользуйтесь только оригинальными комплектующими.

* При прерывании процедуры массажа, дождитесь, пока воздух выйдет из всех массажных элементов.

Наименование частей и описание.

1. Основная часть.



① Разминаящая секция
- Элемент, находящийся внутри секции движется вверх и вниз, плотно прилегая к икрам, формируя прекрасную линию ног.

② Массажная секция
- Функция массажа усилена дополнительной функцией прогрева.

*Цикл длится 15 минут и таймер прекращает работу, независимо от выбора функций.

Для продолжения работы снова включите массажёр.

*Вы можете выбрать желаемую функцию с помощью кнопок на панели управления.

③ Панель управления

Кнопка включения/авторезим – При включении массажёра начинает работать автоматический режим

Кнопка включения разминаящего режима -

Разминаящий эффект достигается устройством, которое перемещается вдоль икр.

Кнопка включения массирующей секции - Массаж может проводиться одновременно с накачиванием накладок.

Кнопка включения пневмомассажа (Это касается Seven Liner Slim) - пневмомассаж с использованием воздушных накладок может регулироваться и использоваться в 3 этапа.

④ Окошко индикации

- Окошко индикации работает при подключении к сети.




2. Рекомендации по использованию.



③ Воздушные накладки

(1) предплечье

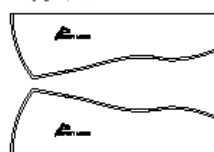

(2) бедро




Если соединить две накладки вместе, то их можно использовать для массажа живота.

3. Комплект поставки.

① Пакет




② Воздушные шланги

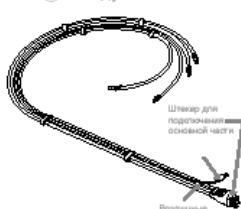

Seven Liner	Основная часть	Руко-во пользователя	Комплект поставки		
			Воздушная накладка		Воздушный шланг
			Предплечье	Бедро	
SLIM	1	1	нет	нет	нет
SLIM SET	1	1	2	2	1

Правила использования.

1. Основная часть.

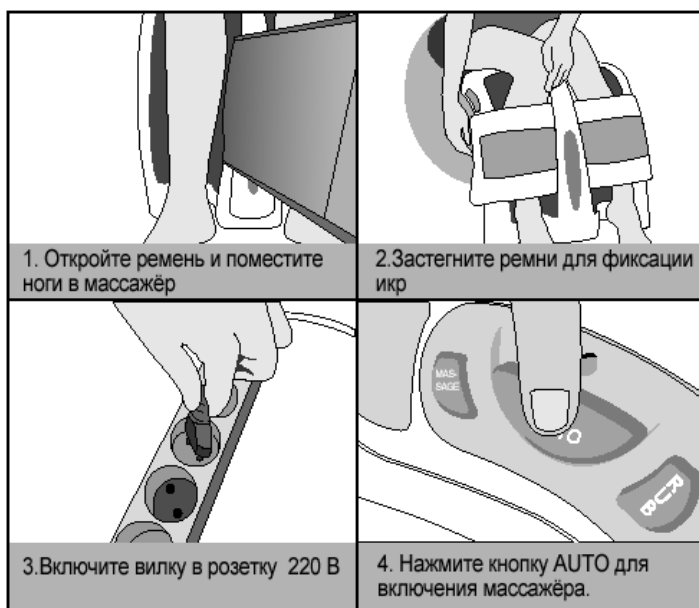

2. Режим массажа / Разминающий режим



Пневмомассаж (Seven Liner Slim Set)

(1) Предплечье


<p>1. Присоедините вилку шланга к основной части и нажмите снова.</p>	<p>2. Присоедините шланги к отверстиям соответствующего цвета</p>	<p>3. наденьте накладку на руку и застегните молнию</p>
		<p>4. Зафиксируйте с помощью липучки</p> <p>5. Нажмите кнопку пневмомассажа</p> <p>Для улучшения эффекта равномерного распределения воздуха сожмите пальцы в кулак</p>

(2) Бедро

		<p>Приложите массажёр к бёдрам (к коленям)</p>
<p>1. Присоедините вилку шланга к основной части и нажмите снова</p>	<p>2. Оберните широкую секцию вокруг пояса</p>	<p>Приложите массажёр к животу и поясу (груди)</p>
		<p>3. Присоедините шланги к отверстиям соответствующего цвета</p> <p>4. Нажмите кнопку пневмомассажа</p> <p>Надевайте воздушную накладку таким образом, чтобы стрелочка указывала на колено, если Вы надеваете воздушную накладку на бедра.</p> <p>Надевайте воздушную накладку таким образом, чтобы стрелочка указывала на грудь, если Вы надеваете воздушную накладку на низ живота (пояс).</p>

Правила пользования.

(3) Живот, пояс.

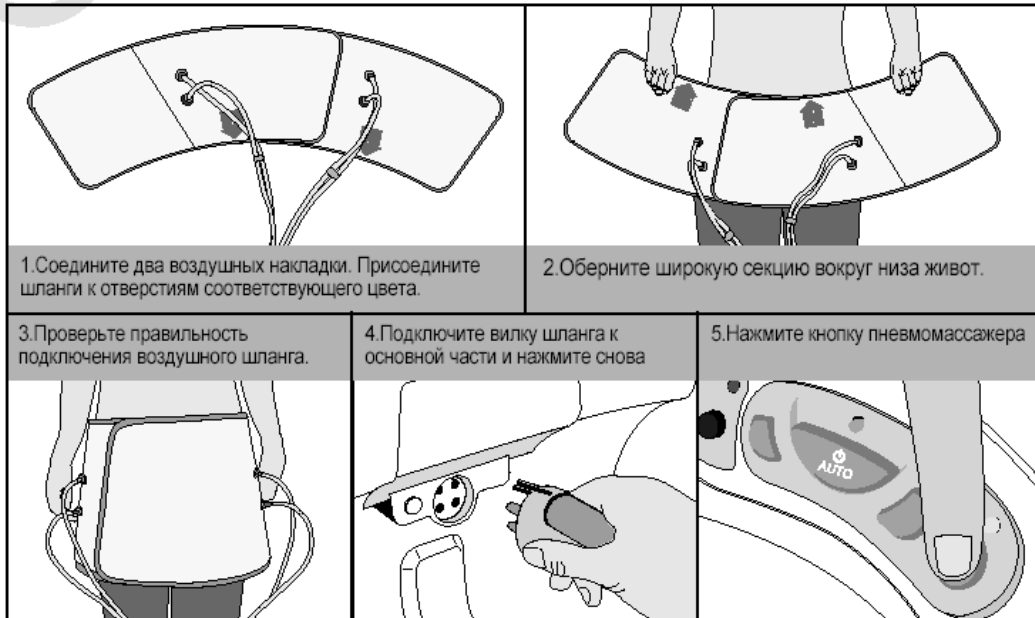

*Пневмомассаж может дополнительно применяться во время массажной, разминающей и автофункции.
 *Если Вы хотите использовать только пневмомассаж не нажимайте кнопку авторежима.
 *Если шланг не подключён правильно массажер не будет работать, т.к. установлен датчик.
 *Не допускайте изгибания или скручивания шланга.
 *Перед использованием снимите такие предметы, как кольца, браслеты, часы. Не допускайте попадания острых предметов в воздушные накладки.

*Массаж осуществляется в трёх режимах – слабый, средний, сильный. Нажмите кнопку 1 раз для выполнения слабого режима, 2 раза для среднего, 3 раза для сильного и 4 раза для выключения (сильный режим сопровождается светодиодной подсветкой). Выполнение программы можно прекратить, если кнопка пневмомассаж удерживается более 3 секунд.

*Массажные накладки нельзя промывать водой. не стирайте их в стиральной машине.



1. Используйте массажер сидя в кресле



2. Используйте массажер находясь в комнате



3. Используйте массажер лежа



4. Используйте массажер для массажа рук

SEVEN LINER SLIM SET



5. Наденьте накладки одновременно на икры и бедра



6. Наденьте накладки одновременно на икры и предплечья



7. Наденьте накладки на низ живота



8. Внешний пневмомассаж может одновременно проводиться с массажем ног

Спецификации



Модель: SEVEN LINER SLIM / SEVEN LINER SLIM SET

Питание: 220 В

Потребление: 25 Вт

Размеры: 514 x 315 x 460 мм

Вес: 6.7 кг (SEVEN LINER SLIM) /
7.0 кг (SEVEN LINER SLIM SET)

Производитель: SEWON CNS CORP.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии	1(один) год с даты продажи	
Дата продажи/Дата производства		
Покупатель	Назв.фирмы / Ф.И.О.	
	Адрес	
Продавец	Назв.фирмы / Магазин	
	Адрес	
	Менеджер-продавец	
Адрес сервисного центра		

Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не влияющие на качество прибора

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец обязан произвести замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости.

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

- механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя (неправильное напряжение), а также повреждений, причиненных в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
- самостоятельных попыток разборки и починки прибора.

Made in Korea